

**STERYLAB PRODUCT RANGE**

Biopsy & localisation needles  
Gynaecological products  
Decontaminating mats for the O.R.  
Aghi per biopsia e localizzazione  
Prodotti per ginecologia  
Tappeti decontaminanti

For further information or a quotation please contact : Colin Walters




**SeedOS**<sup>™</sup>

Radiation Oncology, Urology and General Medical Equipment and Services  
26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7 4BS, United Kingdom  
Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com  
Website: [www.seedos.com](http://www.seedos.com) Mobile: +44 07701059163

**TAPPETO DECONTAMINANTE MULTISTRATO PER SALE AD ALTA ASEPSSI**  
**MULTI-LAYER DECONTAMINATING MAT FOR SURGERY ROOM / I.G.U. UNITS**



**multimat**<sup>®</sup>

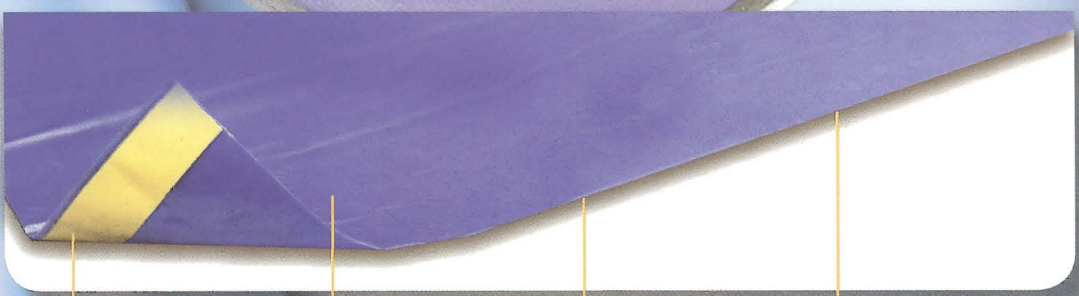

Strisce adesive per una facile installazione al pavimento o su pannello

Adhesive strips for easy installation both on floor or frame

Cimosa non adesiva per un facile strappo

Non adhesive side-band to give an easy peeling

30 fogli in polyfilm adesivi spessore max mm 2,4

30 polyfilm adhesive sheets with total thickness mm 2,4

3 misure disponibili cm 45x115, cm 60x115, cm 90x115 utilizzabili singolarmente o accostati

3 sizes available: cm 45x115, cm 60x115, cm 90x115 which can be used both singularly or multiples

Lo speciale adesivo assicura lo strappo e il trattenimento dello sporco.

Il battericida agisce sulla carica batterica neutralizzandola. Il colore blu scuro indica il progressivo esaurirsi e le zone ancora attive.

Special adhesive ensures that dirt is trapped and held. Antimicrobial additive fights bacteria-laden dirt. The blue color continuously shows the progressive use up and the still active areas.



Di colore blu, con effetto germicida e fungicida, trattiene ed uccide tutti i patogeni trasportati dalle suole e dalle ruote dei carrelli.  
Blue coloured, retains and kills all pathogens carried by shoe soles and trolley wheels.

# TAPPETO DECONTAMINANTE MULTISTRATO PER SALE AD ALTA ASEPSI

MULTI-LAYER DECONTAMINATING MAT FOR SURGERY ROOM / I.G.U. UNITS


**I** tappeti adesivi multistrato rappresentano oggi il mezzo più evoluto e funzionale per prevenire il diffondersi di contaminazioni in sale ad alta asepsi causate dall'introduzione di detriti ad alto inquinamento batterico e micotico per mezzo di suole o ruote di carrelli.

- ▶ STERYLAB produce MULTIMAT®, il più avanzato ed economico sistema multistrato oggi disponibile, facile da installare, semplice da utilizzare, sempre efficace. MULTIMAT® è particolarmente indicato dove si esige il massimo grado di asepsi, come sale di chirurgia profonda, cura intensiva, trapiantati, etc.
- ▶ MULTIMAT® è composto da 30 strati di polyfilm adesivi, sottili e molto resistenti, per uno spessore totale di mm 2,40 ed è ancorabile direttamente al pavimento, anche sotto l'apertura di porte, o sull'apposito pannello metallico di supporto (PAL) per facilitarne la mobilità durante la manutenzione e pulizia dei pavimenti.
- ▶ Di colore blu, trattato con adesivo acrilico additivato con speciale battericida e antimicotico (Benzoisothiazolina-3-one), agredisce e neutralizza le cariche batteriche contenute nei detriti trattenuti dall'adesivo (fino a 100 milioni di batteri per grammo). Il colore scuro di MULTIMAT® evidenzia il progressivo trattenimento di sporco fino all'esaurimento e, grazie al viraggio tra zone sporche grigie e quelle blu, consente il completo sfruttamento della superficie.

**Nowadays** multi-layered mats are the best way to prevent contamination spreading into surgery rooms by the introduction of tracked-in, bacteria-laden dirt and debris.

- ▶ STERYLAB produces MULTIMAT®, the most advanced cheap multi-layered mat available in the market to date, easy to place and use, always effective. MULTIMAT® is used for surgery rooms, I.C.U. units, whenever asepsis is required.
- ▶ MULTIMAT® is composed of 30 adhesive, plastic thin sheets, for a total thickness of mm 2.40
- ▶ MULTIMAT® can be placed down on the floor even under the open side door or on its specifically designed metallic frame (PAL) to allow its movement during floor washing.
- ▶ Blue coloured, MULTIMAT® has the adhesive mixed with a special antimicrobial & antifungal chemical agent (Benzoisothiazolina-3-one). Its antimicrobial action destroys pathogens carried by dirt and debris (up to 100 millions bacteria per gram). The blue colour shows the trapped dirt till the top sheet is used up.

**Impronta di suola contaminata dopo l'uso di MULTIMAT®. NESSUNA CRESCITA BATTERICA.**  
Track of contaminated sole after stepping on MULTIMAT®. NO BACTERIAL GROWTH.  
LAB. BATTERIOLOGICO UNIVERSITA' MILANO - 1995  
BATTERI: ROCHE-DIFCO  
PIASTRE: LP  
AGAR: MERCK

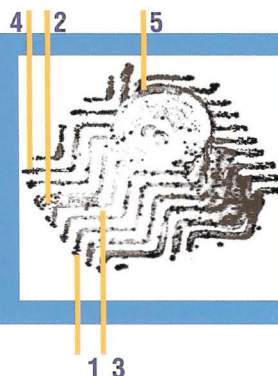

**Impronta in piastra agar di suola contaminata.**  
Si notano colonie di:  
Track of contaminated shoe sole on agar plate.  
Growth of the following bacteria is reported:  
1. STAPHYLOCOCCUS AUREUS  
2. PSEUDOMONAS  
3. SALMONELLA  
4. ESCHERICHIA COLI  
5. SARCINA LUTEA

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004

**MODELLI DISPONIBILI**  
AVAILABLE SIZES

**multimat®**

CODICE D' ORDINE TYPE	DIMENSIONE SIZE	CONFEZ. PCKG pz-units
MMB45	cm 45 x 115	10
MMB60	cm 60 x 115	5
MMB90	cm 90 x 115	5

**Pannello metallico di supporto / Metallic frame:**  
PAL 45 (cm. 47x117) / PAL 60 (cm. 62x117) / PAL 90 (cm. 92x117)

RAPPRESENTANTE DI ZONA:  
AREA SALES REPRESENTATIVE:



[www.seedos.com](http://www.seedos.com)  
Medical Equipment and Services

